



CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN



BARRERA CONTRA
LA PENETRACIÓN
BACTERIANA

AYUDA A EVITAR LA
COLONIZACIÓN Y LA
PROLIFERACIÓN

RETIRADA
ATRAUMÁTICA

ADHESIVO SUAVE
DE SILICONA

ESPUMA DE SILICONA
PHMB

CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN


CARACTERÍSTICAS

Gran absorbencia // Suave, flexible y adaptable // Impermeable y barrera bacteriana // Capa de contacto perforada para heridas con un adhesivo suave de silicona // Fomentan una retirada atraumática // Evita la colonización y proliferación de las bacterias // Favorece un ambiente húmedo para la herida // Eficaz frente a gramnegativas, grampositivas y hongos levaduriformes

ESPUMA DE SILICONA ACTIVHEAL® PHMB APÓSITO SUAVE, ADAPTABLE QUE ES EFICAZ FRENTE A BACTERIAS GRAMNEGATIVAS, BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y HONGOS LEVADURIFORMES. APTO PARA HERIDAS CON EXUDADO DE MODERADO A INTENSO.


El apósito contiene la sustancia polihexametilenbiguanida (PHMB, polihexanida) y, de acuerdo con las pruebas in vitro, ofrece una barrera eficaz contra la penetración bacteriana a través del apósito y evita la colonización y proliferación de las bacterias en el apósito durante un máximo de 7 días. Cuando se somete a pruebas in vitro, el apósito es eficaz frente a SARM, *Streptococcus pyogenes*, VRE, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens* y *Candida albicans*.

La espuma hidrófila cuenta con una película de refuerzo transpirable y flexible que garantiza que la parte superior del apósito pueda transpirar la humedad y funciona en combinación con la capacidad exclusiva de la espuma de absorber altos niveles de exudado a la vez que mantiene un ambiente óptimo para la cicatrización de la herida. La capa perforada de contacto con la herida contiene un adhesivo suave de silicona que proporciona una fijación firme y no irritante y que fomenta una retirada atraumática durante los cambios de apósito. Los apósitos se pueden recolocar durante la aplicación o levantar durante el tiempo de uso para observar la herida.

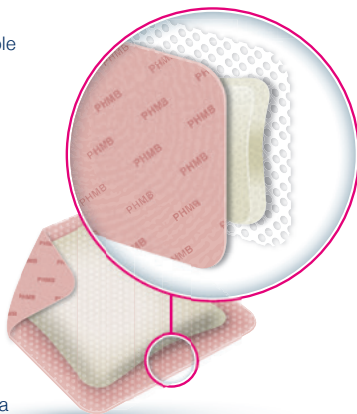

RENDIMIENTO


LA ESPUMA DE SILICONA ACTIVHEAL® PHMB DESTRUYE EL 99,99 % DE LAS BACTERIAS, HONGOS LEVADURIFORMES Y MOHO EN UN PLAZO DE 24 HORAS¹

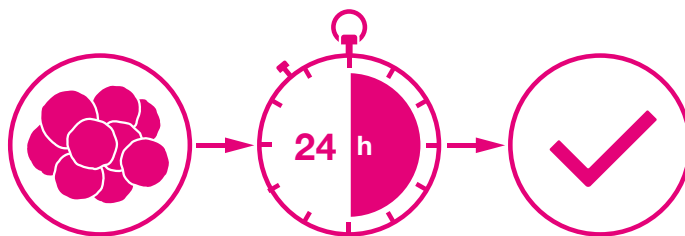

Cuando la espuma de silicona ActivHeal® PHMB se somete a pruebas in vitro¹, es eficaz frente a los siguientes organismos presentes en el apósito:

SARM
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Streptococcus pyogenes

VRE
Serratia marcescens
Candida albicans

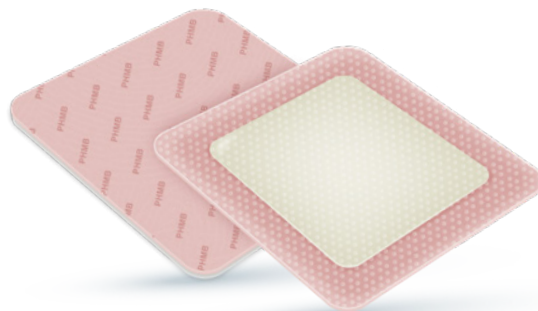

INDICACIONES

El apósito de espuma de silicona ActivHeal® PHMB está indicado para heridas con exudado de moderado a intenso, para su uso en el tratamiento de:

- Incisiones posquirúrgicas
- Úlceras de decúbito
- Úlceras por insuficiencia venosa
- Úlceras diabéticas
- Áreas donantes
- Abrasiones
- Laceraciones
- Quemaduras de 1.º y 2.º grado
- Trastornos dermatológicos
- Otras heridas provocadas por traumatismos
- Como apósito secundario o apósito de cobertura para las heridas comprimidas

Exudado moderado > intenso



Tipos de heridas



- Fungosas
- Cavidades
- De granulación
- Con escaras
- Necróticas

TAMAÑOS Y CÓDIGOS

ESPUMA DE SILICONA PHMB CON BORDE		
TAMAÑO	CANT.	CÓDIGO DE PRODUCTO
8x8	10	9025148
10x10	10	9025155
12,5x12,5	10	9025162
10x20	10	9025179
15x15	10	9025186
20x20	10	9025193
18,5x19,5 Sacro	10	9025209

Advanced Medical Solutions Ltd

Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Reino Unido

T +44 (0)8444 125 755 CE activheal@admedsol.com Web www.activheal.com



Referencias: 1. Informes de laboratorio en archivo: P3551R, P3746R

Para mercados que abarcan EE. UU. y la FDA. Para su distribución fuera del Reino Unido: Activheal es una marca registrada y todos los logotipos incluidos aquí son marcas registradas de Advanced Medical Solutions. © Advanced Medical Solutions 2020 // Fecha de revisión mayo de 2020 // Código del documento AMS/AH-009-02